

xiaomi

Везна за телесен състав S400

50966

Ръководство за употреба

Инструкции за безопасност

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Предупреждения

Ограничения за употреба

* За да не пречите на други електронни устройства или да не причинявате други опасности, не използвайте везната в здравни заведения и на места, където безжичните електронни устройства са изрично забранени, като бензиностанции, зони за съхранение и транспортиране на горива и химикали и всякакви места в близост до запалими предмети и химикали.

* Радиовълните, генерирани от везната, могат да повлияят на нормалната работа на имплантирани медицински устройства или лични медицински устройства. Ако използвате пейсмейкър, кохлеарни импланти, слухови апарати или други имплантирани медицински устройства, моля, консултирайте се с хирург или лекуващ лекар в реномирана болница, преди да използвате везната. След получаване на разрешение използвайте везната под наблюдение и се уверете, че спазвате безопасна разстояние между везната и имплантираните медицински устройства.

* Везната включва батерии и аксесоари. Дръжте ги далеч от деца или домашни любимци, за да избегнете нараняване или грешки в устройството.

Специални потребителски групи

За следните потребителски групи кантарът може да не е в състояние да измерва точно данни за състава на тялото, като телесни мазнини, и може да извършва само основно измерване на телесно тегло:

- * Хора под 6 години или над 80 години.
- * Жени, които са бременни или са в следродилен период.
- * Пациенти със загуба на крак или крак или тежка парализация.
- * Пациенти с патология на гръбначния стълб, ставите или костите, или с остеопороза, цервикална спондилоза, лумбална дискова херния и други ортопедични заболявания.
- * Пациенти с настинка или треска.
- * Пациенти, които са на хемодиализа.
- * Хора, които са професионални спортисти.
- * Ако се прилага някое от следните условия, моля, консултирайте се с хирург или лекуващ лекар в реномирана болница, преди да използвате везната, и използвайте след получаване на разрешение.
- * Хора с нарушена чувствителност на крайниците или проблеми с мобилността поради заболявания или фактори, свързани с възрастта.
- * Пациенти с фрактури или метали импланти.

Общ преглед на продукта

- * Тази скала е предназначена за измерване на тегло, телесни мазнини, сърдечен ритъм и други здравни данни за хора, които са загрижени за здравето, загубата на мазнини и оформянето на тялото.
- * Може също така да осигури различни режими на претегляне, като претегляне и тест за баланс.
- * Тази везна не е медицинско изделие, Информацията за параметрите и анализът на измерванията, предоставени от скалата, са само за справка и не трябва да се използват като основа за диагностика на заболяване, превенция, лечение или надзор и не са подходящи за използване в клиники, болници или други медицински институции.
- * Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само за справка. Действителният продукт и функции може да се различават поради подобрения на продукта.

xiaomi

Везна за телесен състав S400

50966

Ръководство за употреба

Инструкции за безопасност

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Предупреждения

Ограничения за употреба

* За да не пречите на други електронни устройства или да не причинявате други опасности, не използвайте везната в здравни заведения и на места, където безжичните електронни устройства са изрично забранени, като бензиностанции, зони за съхранение и транспортиране на горива и химикали и всякакви места в близост до запалими предмети и химикали.

* Радиовълните, генерирани от везната, могат да повлияят на нормалната работа на имплантирани медицински устройства или лични медицински устройства. Ако използвате пейсмейкър, кохлеарни импланти, слухови апарати или други имплантирани медицински устройства, моля, консултирайте се с хирург или лекуващ лекар в реномирана болница, преди да използвате везната. След получаване на разрешение използвайте везната под наблюдение и се уверете, че спазвате безопасна разстояние между везната и имплантираните медицински устройства.

* Везната включва батерии и аксесоари. Дръжте ги далеч от деца или домашни любимци, за да избегнете нараняване или грешки в устройството.



Специални потребителски групи

За следните потребителски групи кантарът може да не е в състояние да измерва точно данни за състава на тялото, като телесни мазнини, и може да извършва само основно измерване на телесно тегло:

- * Хора под 6 години или над 80 години.
- * Жени, които са бременни или са в следродилен период.
- * Пациенти със загуба на крак или крак или тежка парализация.
- * Пациенти с патология на гръбначния стълб, ставите или костите, или с остеопороза, цервикална спондилоза, лумбална дискова херния и други ортопедични заболявания.
- * Пациенти с настинка или треска.
- * Пациенти, които са на хемодиализа.
- * Хора, които са професионални спортисти.
- * Ако се прилага някое от следните условия, моля, консултирайте се с хирург или лекуващ лекар в реномирана болница, преди да използвате везната, и използвайте след получаване на разрешение.
- * Хора с нарушена чувствителност на крайниците или проблеми с мобилността поради заболявания или фактори, свързани с възрастта.
- * Пациенти с фрактури или метали импланти.

Общ преглед на продукта

- * Тази скала е предназначена за измерване на тегло, телесни мазнини, сърдечен ритъм и други здравни данни за хора, които са загрижени за здравето, загубата на мазнини и оформянето на тялото.
- * Може също така да осигури различни режими на претегляне, като претегляне и тест за баланс.
- * Тази везна не е медицинско изделие, Информацията за параметрите и анализът на измерванията, предоставени от скалата, са само за справка и не трябва да се използват като основа за диагностика на заболяване, превенция, лечение или надзор и не са подходящи за използване в клиники, болници или други медицински институции.
- * Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството за потребителя са само за справка. Действителният продукт и функции може да се различават поради подобрения на продукта.

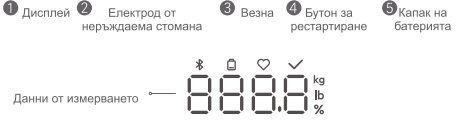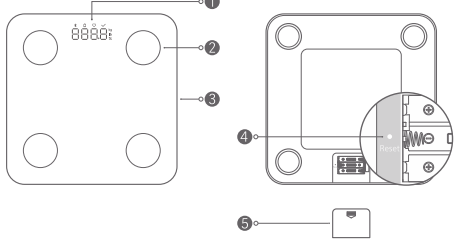

	Bluetooth® икона: Когато иконата остане бяла, това показва нормална Bluetooth връзка. Когато иконата мига в бяло, това означава, че няма Bluetooth връзка.
	Икона за изтощена батерия: Когато иконата мига в червено, това показва, че батерията трябва да бъдат сменени поради недостатъчно ниво на батерията.
	Икона за пулс: Иконата остава бяла, когато пулсът се измерва и показва.
	Стандартна икона: Когато иконата остане бяла, това показва, че измерената стойност е в стандартния диапазон. Когато иконата е изключена, това показва, че измерената стойност е извън стандартния диапазон.
	Икона за процент телесни мазнини: Иконата остава бяла, когато се показва процентът телесни мазнини.

Забележка: Когато на дисплея се покаже , това показва, че измерената стойност надвишава 150 kg.

Описания за режимите на претегляне на кантара

* Режим на претегляне: Стъплете на кантара, за да измерите теглото, без да е необходима Bluetooth връзка.

* Режим на измерване на телесни мазнини: За измерване на данни като телесни мазнини и пулс след свързване на везната с приложението.

* Режим на претегляне на малки предмети: За претегляне на предмети от 0,1 kg или повече след активиране на везната.

Забележка: За да събдните везната, внимателно стъплете или натиснете повърхността на везната, когато претегляте малки предмети под 5 kg.

След това продължете с измерването, след като дисплеят покаже 0,0 kg.

* Режим на претегляне с бебе/Режим на тест за баланс: Активирайте претегляне с бебе или тест за баланс в приложението, за да използвате тези режими. Обърнете се към инструкциите в приложението за това как да ги използвате.

Забележка: За да използвате функции като претегляне с бебе, тест за баланс и промяна на мерната единица на везната, трябва да се свържете с приложението.

* Офлайн режим на претегляне: След свързване на везната за първи път, данните от претеглянето могат да бъдат запазени без свързване към телефона. Данните ще бъдат автоматично качени и запазени в приложението Mi Home/Xiaomi Home, когато следващия път свържете везната към телефона.

* Режим на измерване на госта: Активирайте този режим в приложението ипълнете информацията за госта за измерване. Данните на гостите няма да бъдат запазени.


* Споделяне на устройство: След като свържете акаунта си с везната, можете да го споделите с други потребители в приложението. Вашият акаунт като основен акаунт обаче трябва първо да излезе от приложението или да деактивира Bluetooth, за да пренесете връзката с везната, след което споделяният потребител може успешно да се свърже с везната. Функцията за споделяне на устройство е достъпна само за акаунти в Xiaomi.

Бележки:

За актуализации по въздуха (OTA), свържете се с приложението и следвайте инструкциите на екрана. Натиснете и задръжте бутона за нулиране за 7 секунди, за да свържете отново везната или да я възстановите до фабричните настройки.

Как да използвам

Поставяне на батериите

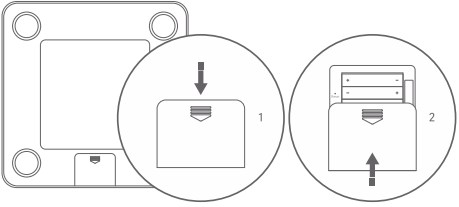

- Обърнете везната и отворете капака на батерията на гърба, както е показано.
- Поставете батериите и се уверете, че положителните и отрицателните полюси са поставени правилно. Поставете обратно капака на батерията и тогава везната ще се включи автоматично.
- Поставете везната върху твърда и равна повърхност и я оставете да престои 30 секунди или внимателно стъплете върху повърхността на везната. След това използвайте везната, след като дисплеят покаже 0,0 kg.

Бележки:

* След поставяне на батерии или преместване на везната, везната може да покаже стойност, когато нико не се претегля. Изчакайте 5 секунди, докато дисплеят се включи, след което внимателно стъплете върху везната, за да я събдните. След като дисплеят покаже 0,0 kg, можете да използвате везната отново.

* Иницирирайте резултата, когато използвате везната за първи път или при първото използване след преместване на везната.

Свързване с приложението Mi Home/Xiaomi Home

Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home*. Използвайте приложението Mi Home/Xiaomi Home, за да контролирате устройството си и да взаимодействате с други интелигентни домашни устройства.

Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ще бъдете насочени към страницата за настройки на връзката, ако приложението вече е инсталирано. Или потърсете „Mi Home/Xiaomi Home“ в магазина за приложения, за да го изтеглите и инсталирате. Отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home, докоснете „+“ в горния десен ъгъл и след това следвайте инструкциите, за да добавите вашето устройство.

*Приложението се нарича приложение Xiaomi Home в Европа (с изключение на Русия). Името на приложението, показано на вашето устройство, трябва да се приеме като стандартно.

Бележки:

* Везната е съвместима с Android 8.0 & iOS 12.0 или по-нова версия.

* Версията на приложението може да е актуализирана, моля, следвайте инструкциите въз основа на текущата версия на приложението.

* Отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home и се уверете, че вашето устройство и кантарът са свързани помежду си чрез Bluetooth, след което можете да видите данните чрез приложението. В случай, че вашето устройство е прекъснато връзката с везната, данните от измерванията ще бъдат запазени в везната и можете да видите данните в приложението само след като са свързани помежду си. Когато вашето устройство не е свързано към везната, можете да използвате функцията на шлюза на везната, за да прочетете данните. Уверете се, че има продукт с възможност за Bluetooth шлюз или устройство за шлюс с най-новата версия на фърмуера, която вече е добавена в приложението, и везната автоматично ще се свърже с него, след което можете да видите данните от измерването в историческите данни на приложението.

Измерване на тегло

- Поставете везната върху твърда и равна повърхност и се уверете, че краката на везната докосват земята и са на едно ниво с нея.
- Уверете се, че везната е свързана с приложението или шлюза. В противен случай може да се извърши само измерване на теглото.
- Застанете боси на кантара с леко разтворени колени и стъпала и се уверете, че и двата крака са пълно по повърхността на кантара. Уверете се, че стъпалата на краката ви покриват електродите колкото е възможно повече. След това застанете прави естествено за измерване.
- Кантарът първо измерва вашето тегло. След като отчитането на теглото се стабилизира, той продължава да измерва други данни за състава на тялото и измерва съденната честота последно.
- След като измерването приключи, подробен отчет за тялото може да се види в приложението Mi Home/Xiaomi Home.

Забележка:

За повече функции и ЧЗВ отидете в Настройки > Помощ и обратна връзка в горния десен ъгъл на приставката за кантар в приложението.

Правилни пози за измерване



Неправилни пози за измерване



Бележки:

* Везната е съвместима с Android 8.0 & iOS 12.0 или по-нова версия.

* Версията на приложението може да е актуализирана, моля, следвайте инструкциите въз основа на текущата версия на приложението.

* Отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home и се уверете, че вашето устройство и кантарът са свързани помежду си чрез Bluetooth, след което можете да видите данните чрез приложението. В случай, че вашето устройство е прекъснато връзката с везната, данните от измерванията ще бъдат запазени в везната и можете да видите данните в приложението само след като са свързани помежду си. Когато вашето устройство не е свързано към везната, можете да използвате функцията на шлюза на везната, за да прочетете данните. Уверете се, че има продукт с възможност за Bluetooth шлюз или устройство за шлюс с най-новата версия на фърмуера, която вече е добавена в приложението, и везната автоматично ще се свърже с него, след което можете да видите данните от измерването в историческите данни на приложението.

Измерване на тегло

- Поставете везната върху твърда и равна повърхност и се уверете, че краката на везната докосват земята и са на едно ниво с нея.
- Уверете се, че везната е свързана с приложението или шлюза. В противен случай може да се извърши само измерване на теглото.
- Застанете боси на кантара с леко разтворени колени и стъпала и се уверете, че и двата крака са пълно по повърхността на кантара. Уверете се, че стъпалата на краката ви покриват електродите колкото е възможно повече. След това застанете прави естествено за измерване.
- Кантарът първо измерва вашето тегло. След като отчитането на теглото се стабилизира, той продължава да измерва други данни за състава на тялото и измерва съденната честота последно.
- След като измерването приключи, подробен отчет за тялото може да се види в приложението Mi Home/Xiaomi Home.

Забележка:

За повече функции и ЧЗВ отидете в Настройки > Помощ и обратна връзка в горния десен ъгъл на приставката за кантар в приложението.

Правилни пози за измерване



Неправилни пози за измерване



Предпазни мерки

* За да осигурите точни данни, уверете се, че стъпалата на краката ви са сухи и чисти по време на измерването. Носете леки дрехи и стойте боси, като поддръжате пълен контакт между стъпалата на краката си и металните електроди.

* Не носете краката и не слязайте от кантара по време на измерване, освен ако не е необходимо.

* Измервайте в един и същи период от време и при едни и същи условия всеки ден.

* Опитайте се да избегнете използването на везната веднага след усилените тренировки, консумация на големи количества алкохол, вода или храна или посещение на сауна. Направете измервания, след като тялото ви се е възстановило, за да избегнете повлияване на точността на резултатите.

* Препоръчително е измерването на пулса да се извършва в спокойно състояние.

* Везната поддържа две мерни единици: "kg" и "lb".

* Мерната единица на везната е зададена на "kg" по подразбиране. Можете да го промените в настройките на везната в приложението Mi Home/Xiaomi Home.

* Използвайте везната в суха среда. Не го използвайте във влажни среди като баня.

* Не потапяйте везната във вода или друга течност.

* Не стъпвайте върху везната за измерване с мокри крака или когато повърхността на везната е мокра, за да избегнете подхлъзване.

* Не използвайте везната в среда с температури над 40 °C, под 0 °C или близо до силни магнитни полета. Дръжте го далеч от източници на вода, източници на огън и влажна, прашина или корозионна среда. Не го използвайте в близост до електрически печки, микровълнови печки, фурни, бойлери, отъждев, свещи и други източници на висока температура, за да избегнете повлияване на работата на батерията и причиняване на грешки в скалата.

* Не удиряйте, стискайте, изпускате, хвърляйте или дракскайте везната, защото силен удар може да причини повреда на повърхността на везната. Ако везната е повредена, незабавно спрете да я използвате и се свържете с екипа за следпродажбено обслужване.

Не докосвайте и не се опитвайте да премахнете супените части.

* Следвайте инструкциите в това ръководство за употребята, за да използвате правилно везната.

Предупреждения за безопасност на батерията

* Използвайте само безопасни и квалифицирани AAA алкални батерии. Смяната на батерията с грешен тип може да доведе до повреда на защитната защита, причинявай експлозия или пожар.

* Не поставяйте батерията в среда с изключително висока температура, като например на пряка слънчева светлина, огън, микровълнова фурна или фурна. В противен случай това може да причини експлозия на батерията или изтичане на запалими течности или газове.

* Не разглобявайте, удряйте, стискайте или режете батерията. Никога не докосвайте и не дърпайте батерията с остри предмети или отвертки.

В противен случай батерията може да избухне.

* Незабавно спрете да използвате батерията, ако тя силно се подуде.

* Не потапяйте батерията, за да избегнете химически изгаряния.

* Ако смятате, че батерията може да е била погълната или поставена някъде в тялото, моля, незабавно потърсете медицинска помощ.

* Ако отделиенето за батерии не е здраво затворено, спрете да използвате везната и я дръжте далеч от деца.

* Не изхвърляйте батериите като битов отпадък. Изхвърлете ги безопасно според местните закони и разпоредби.

Изхвърлете използваните батерии според инструкциите.

* Не потапяйте батерията. Опасност от химическо изгаряне.

* Съхранявайте новите и използваните батерии далеч от деца.

* Ако отделиенето за батерията не се затвора добре, спрете да използвате продукта и го дръжте далеч от деца.

Предпазни мерки

* За да осигурите точни данни, уверете се, че стъпалата на краката ви са сухи и чисти по време на измерването. Носете леки дрехи и стойте боси, като поддръжате пълен контакт между стъпалата на краката си и металните електроди.

* Не носете краката и не слязайте от кантара по време на измерване, освен ако не е необходимо.

* Измервайте в един и същи период от време и при едни и същи условия всеки ден.

* Опитайте се да избегнете използването на везната веднага след усилените тренировки, консумация на големи количества алкохол, вода или храна или посещение на сауна. Направете измервания, след като тялото ви се е възстановило, за да избегнете повлияване на точността на резултатите.

* Препоръчително е измерването на пулса да се извършва в спокойно състояние.

* Везната поддържа две мерни единици: "kg" и "lb".

* Мерната единица на везната е зададена на "kg" по подразбиране. Можете да го промените в настройките на везната в приложението Mi Home/Xiaomi Home.

* Използвайте везната в суха среда. Не го използвайте във влажни среди като баня.

* Не потапяйте везната във вода или друга течност.

* Не стъпвайте върху везната за измерване с мокри крака или когато повърхността на везната е мокра, за да избегнете подхлъзване.

* Не използвайте везната в среда с температури над 40 °C, под 0 °C или близо до силни магнитни полета. Дръжте го далеч от източници на вода, източници на огън и влажна, прашина или корозионна среда. Не го използвайте в близост до електрически печки, микровълнови печки, фурни, бойлери, отъждев, свещи и други източници на висока температура, за да избегнете повлияване на работата на батерията и причиняване на грешки в скалата.

* Не удиряйте, стискайте, изпускате, хвърляйте или дракскайте везната, защото силен удар може да причини повреда на повърхността на везната. Ако везната е повредена, незабавно спрете да я използвате и се свържете с екипа за следпродажбено обслужване.

Не докосвайте и не се опитвайте да премахнете супените части.

* Следвайте инструкциите в това ръководство за употребята, за да използвате правилно везната.

Предупреждения за безопасност на батерията

* Използвайте само безопасни и квалифицирани AAA алкални батерии. Смяната на батерията с грешен тип може да доведе до повреда на защитната защита, причинявай експлозия или пожар.

* Не поставяйте батерията в среда с изключително висока температура, като например на пряка слънчева светлина, огън, микровълнова фурна или фурна. В противен случай това може да причини експлозия на батерията или изтичане на запалими течности или газове.

* Не разглобявайте, удряйте, стискайте или режете батерията. Никога не докосвайте и не дърпайте батерията с остри предмети или отвертки.

В противен случай батерията може да избухне.

* Незабавно спрете да използвате батерията, ако тя силно се подуде.

* Не потапяйте батерията, за да избегнете химически изгаряния.

* Ако смятате, че батерията може да е била погълната или поставена някъде в тялото, моля, незабавно потърсете медицинска помощ.

* Ако отделиенето за батерии не е здраво затворено, спрете да използвате везната и я дръжте далеч от деца.

* Не изхвърляйте батериите като битов отпадък. Изхвърлете ги безопасно според местните закони и разпоредби.

Изхвърлете използваните батерии според инструкциите.

* Не потапяйте батерията. Опасност от химическо изгаряне.

* Съхранявайте новите и използваните батерии далеч от деца.

* Ако отделиенето за батерията не се затвара добре, спрете да използвате продукта и го дръжте далеч от деца.

Ако смятате, че батериите може да са били погълнати или поставени

Информация за съответствие с нормативните изисквания

ЕС декларация за съответствие



С настоящото Zhuhai Yunmai Technology Co., Ltd. декларира, че радиооборудването тип MJTZC01YM е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Информация за OEEE



Всички продукти, носещи този символ, са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно Директива 2012/19/ЕС), което не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване в определен събирателен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, назначен от правителството или местните власти. Правилното извършване и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на такива пунктове за събиране.

Словната марка и логa Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от Xiaomi Communications Co., Ltd. е по лиценз. Други търговски марки и търговски имена са на съответните им собственици.

Произведено за: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Произведено от: Zhuhai Yunmai Technology Co., Ltd.
(компания на Mi Ecosystem)
Адрес: Unit 1201-1203, Youte Headquarters Building, No. 88 Xingye Road, Xiangzhou District, Zhuhai, Гуандун, Китай

За допълнителна информация, моля, посетете www.mi.com
Викнете долната част на везната за информация за табелката.
Произведено в Китай.
Версия на ръководството за потребителя: V1.0

Вносител:
Beryko s.r.o,
Pod Vinicemi 931/2, 301 00
Пилзен
www.beryko.cz

Информация за съответствие с нормативните изисквания

ЕС декларация за съответствие



С настоящото Zhuhai Yunmai Technology Co., Ltd. декларира, че радиооборудването тип MJTZC01YM е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Информация за OEEE



Всички продукти, носещи този символ, са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (WEEE съгласно Директива 2012/19/ЕС), което не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване в определен събирателен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, назначен от правителството или местните власти. Правилното извършване и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с монтажника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на такива пунктове за събиране.

Словната марка и логa Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от Xiaomi Communications Co., Ltd. е по лиценз. Други търговски марки и търговски имена са на съответните им собственици.

Произведено за: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Произведено от: Zhuhai Yunmai Technology Co., Ltd.
(компания на Mi Ecosystem)
Адрес: Unit 1201-1203, Youte Headquarters Building, No. 88 Xingye Road, Xiangzhou District, Zhuhai, Гуандун, Китай

За допълнителна информация, моля, посетете www.mi.com
Викнете долната част на везната за информация за табелката.
Произведено в Китай.
Версия на ръководството за потребителя: V1.0

Вносител:
Beryko s.r.o,
Pod Vinicemi 931/2, 301 00
Пилзен
www.beryko.cz

Везна за телесен състав S400 50966

Вид на продукта	
Производител	
Модел	
Серийн номер	
Гаранционен срок	

Дата на покупка

Магазин

Продавач (подпис и печат)

Клиент:

Име:

Адрес:Телефон:

Запознайте се и приемайте условията на гаранцията! Подпис:

Общи гаранционни условия

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ – ПРЕДИ ПОКУПКАТА СЕ ЗАПОЗНАЙТЕ

ВНИМАТЕЛНО С ТЕЗИ УСЛОВИЯ

Благодарим Ви, че се доверихте на Xiaomi. Гаранцията се прилага за продукти с марка Xiaomi.
Настоящата гаранция е съобразена със Закона на предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки. Гаранцията се предоставя от Цифротех България ООД, ЕИК 206342062 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България № 109, Бизнес Център Вертиго, ет. 2, Офис 2.11.

Гаранцията покрива дефекти възникнали по време на гаранционния срок, поради некачествена изработка или поради вложени некачествени материали. Гаранцията не ограничава по никаква начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България.

Гаранцията е валидна само при условие, че дефектът се е проявил при спазване на инструкциите за употреба. При всички случаи, ако продуктът е закупен с фактура издадена на търговец по смисъла на Търговския закон или на името на юридическо лице, се счита че същият се използва за цели различни от потребителска (домашна) употреба. Това не важи само в случаите, когато в инструкциите за експлоатация и техническите характеристики изрично е упоменато, че е предвидена и професионална употреба.

Гаранцията е валидна само при представяне на издадената при покупката на продукта касова бележка/фактура и оригиналната гаранционна карта в комплект документи на уреда, която съдържа модел и серийн номер.
Гаранционна карта с нечетлив серийн номер, неправилно или некоректно попълнена, или такава със следи от интервенция е невалидна!

Точки за приема за сервис в България:
Местото от където е закупен продукта или
Сръчно сервис: гр. София, Бул. "Проф. Цветан Лазаров" №10
Национален телефон: 0700 19 960 (цената на разговора зависи от тарифния план на клиента)
Email: service.mobile@service.bg
Web: <https://www.sservice.bg>

Освен ако не е забранено от закона, следпродажбено обслужване се ограничава до територия на Република България до степента, приложима съгласно местните закони, продукти, които не са били надлежно внесени и/или не са били надлежно произведени от Xiaomi и/или не са били надлежно придобити от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не са обхванати от законова гаранция. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранции от търговца на дребно, който е продал продукта. Ето защо, Xiaomi ви кани да се свържете с продавача, от когото сте закупили продукта.

Стандартната гаранция на продукти Xiaomi за територия на Република България е 24 месеца.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1.Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта. В случай на несъответствие между посочените в гаранционната карта дани

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Вид на продукта	
Производител	
Модел	
Серийн номер	
Гаранционен срок	

Дата на покупка

Магазин

Продавач (подпис и печат)

Клиент:

Име:

Адрес:Телефон:

Запознайте се и приемайте условията на гаранцията! Подпис:

Общи гаранционни условия

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ – ПРЕДИ ПОКУПКАТА СЕ ЗАПОЗНАЙТЕ

ВНИМАТЕЛНО С ТЕЗИ УСЛОВИЯ

Благодарим Ви, че се доверихте на Xiaomi. Гаранцията се прилага за продукти с марка Xiaomi.
Настоящата гаранция е съобразена със Закона на предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки. Гаранцията се предоставя от Цифротех България ООД, ЕИК 206342062 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България № 109, Бизнес Център Вертиго, ет. 2, Офис 2.11.

Гаранцията покрива дефекти възникнали по време на гаранционния срок, поради некачествена изработка или поради вложени некачествени материали. Гаранцията не ограничава по никаква начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България.

Гаранцията е валидна само при условие, че дефектът се е проявил при спазване на инструкциите за употреба. При всички случаи, ако продуктът е закупен с фактура издадена на търговец по смисъла на Търговския закон или на името на юридическо лице, се счита че същият се използва за цели различни от потребителска (домашна) употреба. Това не важи само в случаите, когато в инструкциите за експлоатация и техническите характеристики изрично е упоменато, че е предвидена и професионална употреба.

Гаранцията е валидна само при представяне на издадената при покупката на продукта касова бележка/фактура и оригиналната гаранционна карта в комплект документи на уреда, която съдържа модел и серийн номер.
Гаранционна карта с нечетлив серийн номер, неправилно или некоректно попълнена, или такава със следи от интервенция е невалидна!

Точки за приема за сервис в България:
Местото от където е закупен продукта или
Сръчно сервис: гр. София, Бул. "Проф. Цветан Лазаров" №10
Национален телефон: 0700 19 960 (цената на разговора зависи от тарифния план на клиента)
Email: service.mobile@service.bg
Web: <https://www.sservice.bg>

Освен ако не е забранено от закона, следпродажбено обслужване се ограничава до територия на Република България до степента, приложима съгласно местните закони, продукти, които не са били надлежно внесени и/или не са били надлежно произведени от Xiaomi и/или не са били надлежно придобити от Xiaomi или официален продавач на Xiaomi, не са обхванати от законова гаранция. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранции от търговца на дребно, който е продал продукта. Ето защо, Xiaomi ви кани да се свържете с продавача, от когото сте закупили продукта.

Стандартната гаранция на продукти Xiaomi за територия на Република България е 24 месеца.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1.Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта. В случай на несъответствие между посочените в гаранционната карта дани

(марка, модел, дата на закупуване и др.), данните посочени в издадената при покупката на продукта касова бележка (фактура), за валидни се считат данните посочени в касовата бележка (фактура).
2.Настоящата гаранция не се отнася за:
2.1.Консумативите на продукта – всички отделци се от основния корпус на продукта части, включително не само приставки, кабели.
2.2. Незначителни повреди, включително, но не само: надрасквания, напуквания, промяна на цвета и др.
2.3. Незначителни повреди по специални покрития. Повреди по покритието на продукта (боа) или повята на ръжда.
2.4. Изосени в процеса на обичайната употреба на продукта компоненти, например: пластмасови панели, пластмасови компоненти, обшивки, панели.
3.Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:
3.1. Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в инструкциите за експлоатация на продукта.
3.2. При несъответствие на техническите данни на продукта (марка, модел, серийн № и др.), посочени в гаранционната карта и/или касовата бележка (фактурата) и идентификационните данни на продукта – предмет на рекламация.
3.3. При наличието на интервенции (задрасквания, поправки, заличавания, опит за промяна и др.) върху нанесени на продукта серийн номер, включително когато серийният номер е изцяло или частично заличен.
3.4. При ремонт или опит за ремонт от неутълковани за целта лица.
3.5. Когато повредата е настъпила:
3.5.1. вследствие на наличиеито в корпуса, системите, компонентите и агрегатите на продукта, на чужди, несъвместими с конструктивните им схеми и предназначенияте им тела, като: течности, мазнини, варовик, прах, метални части, баняни, насокоси и др.
3.5.2.под въздействието на агресивна външна среда или поради не полагане на необходимите за уреда грижи.
3.6.Когато дефектът е в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претованения, получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълнии, наводнения и др.), при токов удар или неизправности в захранвателна мрежа или други форсмажорни обстоятелства.
3.7.Когато повредата е причинена умислено или по непредпазливост.
3.8.Всички външни части, които могат да бъдат уредени по невнимание от потребителя: аксесоари, адаптери, батерии, протектори, кабели, предпазители, стъкла, гумени уплътнения и други части с ограничен сериен живот или които имат характер на принадлежност,
3.9.Щети, причинени от услугата (включително ъпгрейди и разширения), извършвани от всеки, който не е представител на Xiaomi.
4.Ваша отговорност е да архивирате всички данни, софтуер или други материали може да сте съхранявали или консумирали върху продукта. Вероятно е, че данни, софтуер или други материали в оборудването ще бъдат загубени или реформирани по време на процеса на обслужване.
5.Цифротех България ЕООД поема еднопосочните транспортни разходи с куриерска верига Speedy.
6.Сервиантът не носи отговорност за механични повреди и надрасквания, настъпили по време на транспорта и престоя на уреда в сервиса, в случаите, когато той е предоставен от купувача без оригиналната си опаковка.
7.Освен до степента, забранена от приложимото законодателство, производителите, вносителят и търговецът нима да бъдат отговорни за повреда на продукта от злополуки, косвени, специални или последицата вреди, включително, но не само, пропуснати ползи, приходи или данни, щети, произтичащи от нарушение на изрични или подразбираща се гаранция или условие, или по която и да е друга правна теория, дори ако Xiaomi е информирана за възможността от подобни щети.
В случаите на замяна на части, възли и детайли, при извършването на гаранционен ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиса и се водят на отчетност.
8.Гаранционният срок не тече по времента престоя на уреда в сервиса.
9.При всички случаи срокът за ремонт започва да тече от датата на предоставяне на продукта, предмет на рекламация, респективно от датата на осигуряване на достъп до същия.

10.В случаите на рекламация, при които след извършване на необходимата диагностика, бъде установено, че уредът предмет на рекламация отговаря на валидната за него техническа спецификация т.е. не е дефектирал, или че причината за дефекта е неспазване на гаранционните условия, купувачът (клиентът) следва да заплати на сервиса извършената диагностика по ценоразпис.
11.Никой няма право, по какъвто и да е повод, да изменя условията по тази гаранция.
Правото Ви на рекламация няма да бъде признато, ако не са приложени и документите, на които се основава претенцията или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното или други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от чл. 26-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки.

10.В случаите на рекламация, при които след извършване на необходимата диагностика, бъде установено, че уредът предмет на рекламация отговаря на валидната за него техническа спецификация т.е. не е дефектирал, или че причината за дефекта е неспазване на гаранционните условия, купувачът (клиентът) следва да заплати на сервиса извършената диагностика по ценоразпис.
11.Никой няма право, по какъвто и да е повод, да изменя условията по тази гаранция.
Правото Ви на рекламация няма да бъде признато, ако не са приложени и документите, на които се основава претенцията или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното или други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от чл. 26-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки.

10.В случаите на рекламация, при които след извършване на необходимата диагностика, бъде установено, че уредът предмет на рекламация отговаря на валидната за него техническа спецификация т.е. не е дефектирал, или че причината за дефекта е неспазване на гаранционните условия, купувачът (клиентът) следва да заплати на сервиса извършената диагностика по ценоразпис.
11.Никой няма право, по какъвто и да е повод, да изменя условията по тази гаранция.
Правото Ви на рекламация няма да бъде признато, ако не са приложени и документите, на които се основава претенцията или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното или други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от чл. 26-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки.

10.В случаите на рекламация, при които след извършване на необходимата диагностика, бъде установено, че уредът предмет на рекламация отговаря на валидната за него техническа спецификация т.е. не е дефектирал, или че причината за дефекта е неспазване на гаранционните условия, купувачът (клиентът) следва да заплати на сервиса извършената диагностика по ценоразпис.
11.Никой няма право, по какъвто и да е повод, да изменя условията по тази гаранция.
Правото Ви на рекламация няма да бъде признато, ако не са приложени и документите, на които се основава претенцията или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното или други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от чл. 26-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки.

10.В случаите на рекламация, при които след извършване на необходимата диагностика, бъде установено, че уредът предмет на рекламация отговаря на валидната за него техническа спецификация т.е. не е дефектирал, или че причината за дефекта е неспазване на гаранционните условия, купувачът (клиентът) следва да заплати на сервиса извършената диагностика по ценоразпис.
11.Никой няма право, по какъвто и да е повод, да изменя условията по тази гаранция.
Правото Ви на рекламация няма да бъде признато, ако не са приложени и документите, на които се основава претенцията или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното или други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от чл. 26-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки.

(марка, модел, дата на закупуване и др.), данните посочени в издадената при покупката на продукта касова бележка (фактура), за валидни се считат данните посочени в касовата бележка (фактура).
2.Настоящата гаранция не се отнася за:
2.1.Консумативите на продукта – всички отделци се от основния корпус на продукта части, включително не само приставки, кабели.
2.2. Незначителни повреди, включително, но не само: надрасквания, напуквания, промяна на цвета и др.
2.3. Незначителни повреди по специални покрития. Повреди по покритието на продукта (боа) или повята на ръжда.
2.4. Изосени в процеса на обичайната употреба на продукта компоненти, например: пластмасови панели, пластмасови компоненти, обшивки, панели.
3.Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:
3.1. Когато не са спазени указанията за съхранение, монтаж и експлоатация, посочени в инструкциите за експлоатация на продукта.
3.2. При несъответствие на техническите данни на продукта (марка, модел, серийн № и др.), посочени в гаранционната карта и/или касовата бележка (фактурата) и идентификационните данни на продукта – предмет на рекламация.
3.3. При наличието на интервенции (задрасквания, поправки, заличавания, опит за промяна и др.) върху нанесени на продукта серийн номер, включително когато серийният номер е изцяло или частично заличен.
3.4. При ремонт или опит за ремонт от неутълковани за целта лица.
3.5. Когато повредата е настъпила:
3.5.1. вследствие на наличиеито в корпуса, системите, компонентите и агрегатите на продукта, на чужди, несъвместими с конструктивните им схеми и предназначенияте им тела, като: течности, мазнини, варовик, прах, метални части, баняни, насокоси и др.
3.5.2.под въздействието на агресивна външна среда или поради не полагане на необходимите за уреда грижи.
3.6.Когато дефектът е в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претованения, получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълнии, наводнения и др.), при токов удар или неизправности в захранвателна мрежа или други форсмажорни обстоятелства.
3.7.Когато повредата е причинена умислено или по непредпазливост.
3.8.Всички външни части, които могат да бъдат уредени по невнимание от потребителя: аксесоари, адаптери, батерии, протектори, кабели, предпазители, стъкла, гумени уплътнения и други части с ограничен сериен живот или които имат характер на принадлежност,
3.9.Щети, причинени от услугата (включително ъпгрейди и разширения), извършвани от всеки, който не е представител на Xiaomi.
4.Ваша отговорност е да архивирате всички данни, софтуер или други материали може да сте съхранявали или консумирали върху продукта. Вероятно е, че данни, софтуер или други материали в оборудването ще бъдат загубени или реформирани по време на процеса на обслужване.
5.Цифротех България ЕООД поема еднопосочните транспортни разходи с куриерска верига Speedy.
6.Сервиантът не носи отговорност за механични повреди и надрасквания, настъпили по време на транспорта и престоя на уреда в сервиса, в случаите, когато той е предоставен от купувача без оригиналната си опаковка.
7.Освен до степента, забранена от приложимото законодателство, производителите, вносителят и търговецът нима да бъдат отговорни за повреда на продукта от злополуки, косвени, специални или последицата вреди, включително, но не само, пропуснати ползи, приходи или данни, щети, произтичащи от нарушение на изрични или подразбираща се гаранция или условие, или по която и да е друга правна теория, дори ако Xiaomi е информирана за възможността от подобни щети.
В случаите на замяна на части, възли и детайли, при извършването на гаранционен ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиса и се водят на отчетност.
8.Гаранционният срок не тече по времента престоя на уреда в сервиса.
9.При всички случаи срокът за ремонт започва да тече от датата на предоставяне на продукта, предмет на рекламация, респективно от датата на осигуряване на достъп до същия.

10.В случаите на рекламация, при които след извършване на необходимата диагностика, бъде установено, че уредът предмет на рекламация отговаря на валидната за него техническа спецификация т.е. не е дефектирал, или че причината за дефекта е неспазване на гаранционните условия, купувачът (клиентът) следва да заплати на сервиса извършената диагностика по ценоразпис.
11.Никой няма право, по какъвто и да е повод, да изменя условията по тази гаранция.
Правото Ви на рекламация няма да бъде признато, ако не са приложени и документите, на които се основава претенцията или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното или други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от чл. 26-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки.

10.В случаите на рекламация, при които след извършване на необходимата диагностика, бъде установено, че уредът предмет на рекламация отговаря на валидната за него техническа спецификация т.е. не е дефектирал, или че причината за дефекта е неспазване на гаранционните условия, купувачът (клиентът) следва да заплати на сервиса извършената диагностика по ценоразпис.
11.Никой няма право, по какъвто и да е повод, да изменя условията по тази гаранция.
Правото Ви на рекламация няма да бъде признато, ако не са приложени и документите, на които се основава претенцията или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното или други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от чл. 26-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки.

10.В случаите на рекламация, при които след извършване на необходимата диагностика, бъде установено, че уредът предмет на рекламация отговаря на валидната за него техническа спецификация т.е. не е дефектирал, или че причината за дефекта е неспазване на гаранционните условия, купувачът (клиентът) следва да заплати на сервиса извършената диагностика по ценоразпис.
11.Никой няма право, по какъвто и да е повод, да изменя условията по тази гаранция.
Правото Ви на рекламация няма да бъде признато, ако не са приложени и документите, на които се основава претенцията или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното или други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от чл. 26-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки.

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предави рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната и с нова, освен ако това е невъзможно или изборът от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ

Освен до степента, забранена от приложимото законодателство, всички подразбиращи се гаранции (включително гаранции за продавачите и пригодност за конкретна цел) ще има ограничена продължителност до максимална продължителност на тази гаранция. Счита се, че даден начин за обезщетяване на потребителя в непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1.стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2.значимостта на несъответствието;
3.възможността да бъде предоставено друго средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя. Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са неефективни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него.
Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, потребителът има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

1.продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и в рамките на един месец за стоки, различни от стоите, съдържащи цифрови елементи или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие поради непропорционално големи разходи за него.
2.явнови се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки;
3.несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или
4.продавачът е задал или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

5.Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоите при липса на несъответствие.
6.При разваляне на договора продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача.

Потребителят може да упражни правата си по закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и продажба на стоки в следните срокове:
1.за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката;
2.за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга или в рамките на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2, без да се възпрепятства прилагането на чл. 28, ал. 3, т. 1;

3.за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;
4.за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителът може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора.

При несъответствие на стоите потребителят има правни средства за защита срещу продавача, които не са свързани с разходи за него. Предоставената търговска гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя.

Тази търговска гаранция не отменя правата на потребителя, произлизащи от чл. 31-37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС).

При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предави рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на